

营造安全的腐蚀性化学品使用环境



代理、经销商价格请咨询 熊经理18620021011



防腐蚀

ANTICORROSION

采用PP材质，可储存强腐蚀性化学品



防渗透

ANTI OSMOSIS

人体操作面设有挡水防溢处理



精细加工

FINE MACHINING

柜体采用一次折弯处理成型不易变形，整体美观大方



安全存储

SECURE STORAGE

下柜体门板一律采用对折边构造，敦实牢固，安全存储



可定制

SECURE STORAGE

可根据客户要求加工定制

净气型通风柜

安全可靠·节能环保




八大优势 值得拥有



无需外排接管
室内循环净化空气



节省空调能耗
降低企业运营成本

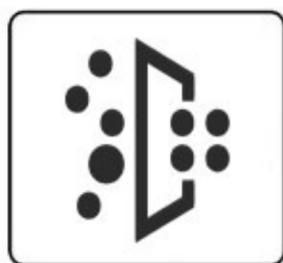

化学过滤材料
安全无二次污染



聚丙烯PP材质
耐强酸强碱腐蚀





安装简单快速
自由移动实验



智能自动调控
保持最佳运行状态



高精度监测探头
危险警报确保安全



液晶显示
轻松触摸操作

为什么选择净气型通风柜



1 高效节能

净气型通风柜运行功率低，不外排废气，不损耗空调能耗，节省企业运营成本

2 零基础设施费

安装简单快速，工期短；无需连接大楼通风系统和建设室外废气处理装置。

3 无需申报环评

室内内循环净化，不向室外排放废气，不必向生态环境部门审批。

化学过滤 确保使用安全

采用美国进口的先进气相处理技术，过滤单元内部填充化学过滤材料，对有害有毒气体进行化学反应，效率高，无逆转，无二次污染危害。



多滤芯

数量多
使用寿命越长



大面积

面积越大
拦截污染物越多




高效率

效率越高
过滤更彻底



安全环保


吸附氧化分解
无二次污染

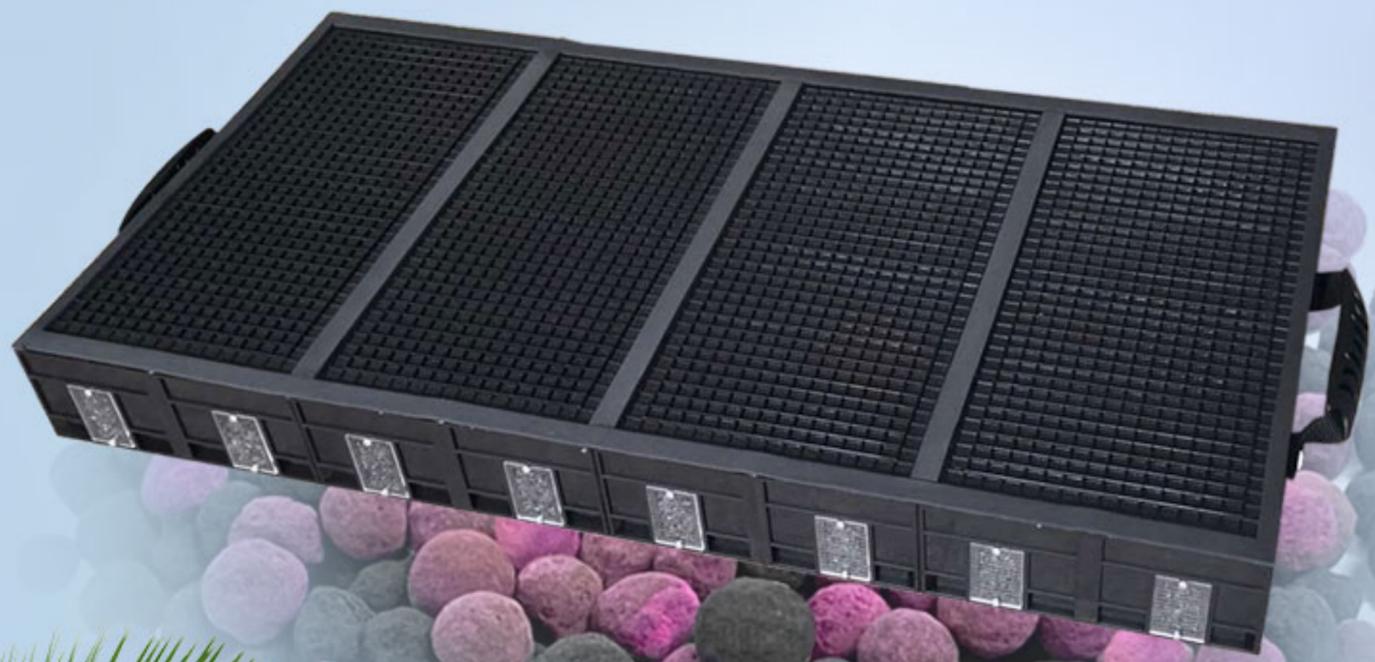

滤芯长效使用可达10个月

滤芯长双使用可达18个月

超大吸附量，无需频繁更换，节省开支

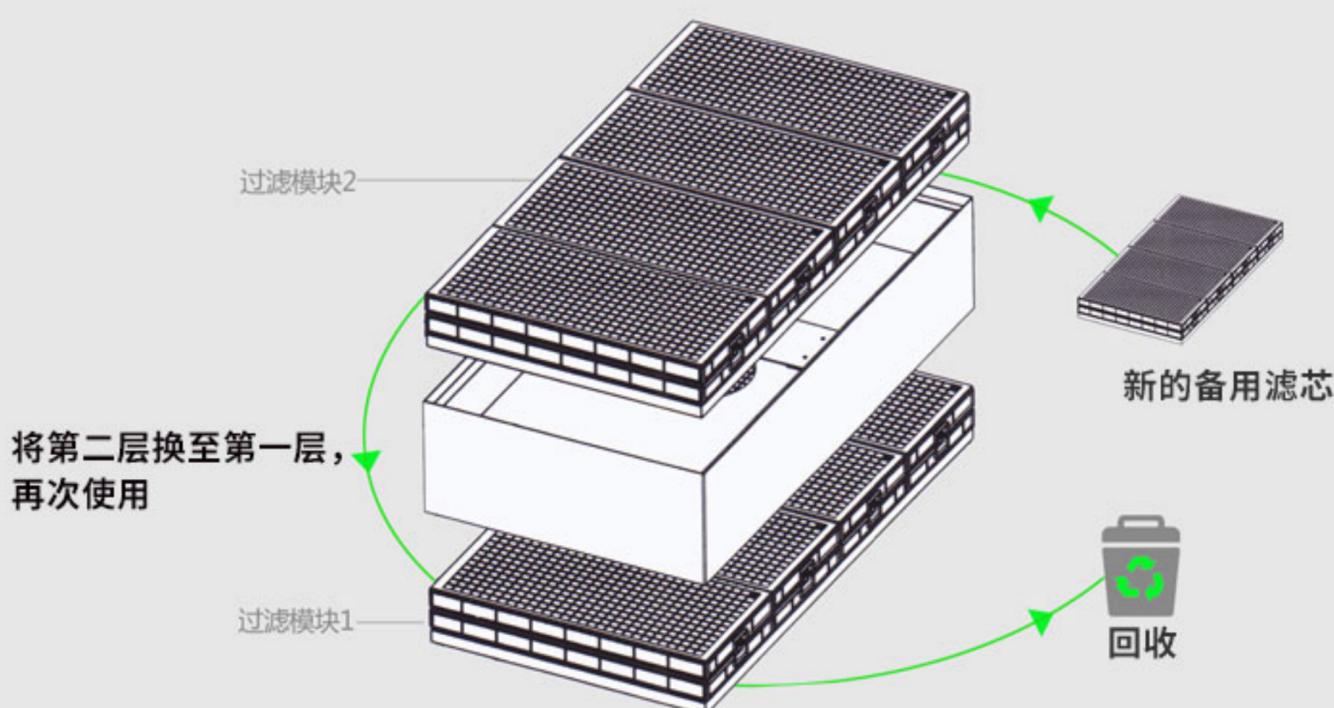

过滤器配型:

- 01. 有机气体过滤模块
- 02. 无机气体过滤模块
- 03. 甲醛过滤模块
- 04. 氨气/甲胺过滤模块
- 05. 放射性碘过滤模块
- 06. 颗粒物过滤模块

*注：滤芯寿命与使用频率和实验挥发量有关，18个月是指一般情况下

安全认证 使用更放心



JG/T385-2012

中国《无风管自净型排风柜》标准

过滤效率 $< 1\%TWA$ 值	控制浓度 $\leq 0.5PPM$	面风速 $0.4-0.6m/s$
-----------------------------	------------------------------	----------------------------

更多重要检测认证



排风柜JB/T6412-1999



风量/面风速/噪音测试



TVOC/盐酸/氨/苯过滤测试





欧盟CE认证



RoHS认证



计算机软件著作权

多重安全配置 安全有保证

双色声光报警灯 时刻提醒

当检测到面风速、空气质量、温度超过设定时发出警报



高灵敏度传感器 时刻捕捉

日本进口电化学探头，高精度、响应快、稳定性强，精确检测空气质量和面风速，并发出警报，调节风机转速，保持面风速0.4-0.6m/s，确保实验人员安全

智能自动调节面风速

内置智能环境系统，根据传感器监测的数据，自动调节风机转速，维持良好的面风速在0.4-0.6m/s之间

0.4-0.6m/s



液晶显示屏触摸控制 多维度智能显示



①

面风速

0.5 m/s

面风速数值显示

②

TVOC

0.1 PPM

柜内和室内TVOC浓度

③

温度

26 °C

温度数值显示

④

湿度

56 %

湿度数值显示

⑤

运行倒计时

10天12小时

滤芯寿命显示

滤芯更换提醒，不代表真实情况，根据过滤效果决定继续使用或更换，并重置适当的时间。



精选优质PP材料


优质PP聚丙烯材料，密度小、韧性好，安全耐高温，良好的绝缘性和强耐酸碱腐蚀性，耐磨损抗撞击，具有十年以上的使用寿命。

PP材质
可使用强酸强碱



长期接触强酸碱完好无损

金属材质
可使用弱酸弱碱

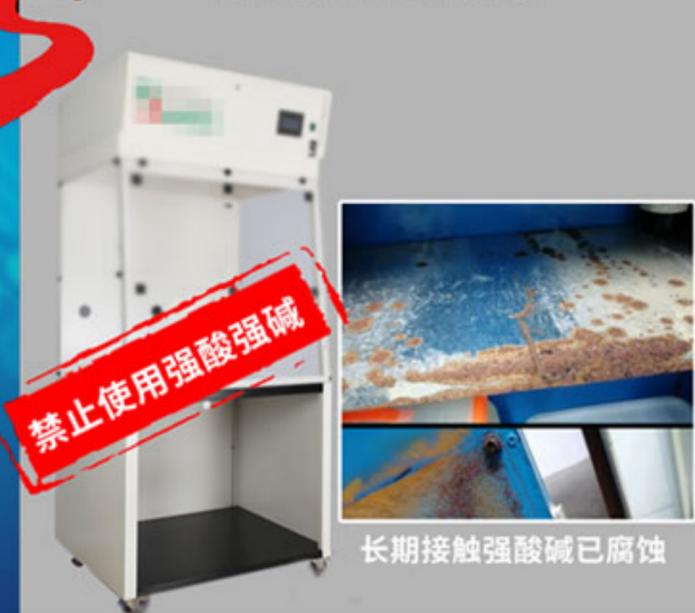

长期接触强酸碱已腐蚀

质地坚硬

防潮耐磨

耐高温

质地坚硬
结实耐用

防潮耐腐蚀
品质优良

耐高温
高温烘干不变形

表面纹理清晰
美观大方

品牌生产厂商
品质上佳

加工
性能良好

One more thing... 复式净气型通风柜

可接入原有通风系统外排空气，柜内气体通风过滤后部分外排，部分回到柜内循环净化，顶部阀门可控制排风和回风比例，完全不会排到室内。



经久耐用 多重人性化设计



进口直流无刷风机

噪音低、功耗小、运行稳定动力强力，使用寿命长。

面风速传感器 实时监测 智能运行

精确显示当前面风速，



系统根据面风速自动调节风机转速，使保持0.4-0.6m/s



高承重福马轮

强劲载重，耐磨牢固
方便移动到其他地方
进行实验操作

LED防水防油防尘灯

光线明亮，节能耐光衰
，抗震抗冲击耐高温。



UV紫外线杀菌灯

品牌UV杀菌灯，光波
穿透强、强度大，快速
杀灭细菌。（选配）

操作台

标配环氧树脂板、可选
玻璃钢板、陶瓷板等等



应用广泛



搅拌



超声波清洗



移液



红外分析仪



旋转蒸发





混合



取液



教学展示



称量




酶标仪



微波消解



高效液相色谱

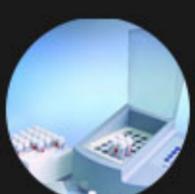

COD实验



产品参数



型号	DT800	DT1000	DT1300	DT1600	DT1800
操作空间尺寸(mm)	780*830*750	980*830*750	1280*830*750	1580*830*750	1780*830*750
外部尺寸 (mm)	800*940*2020	1000*940*2020	1300*940*2020	1600*940*2020	1800*940*2020
过滤器数量	2	2	4	6	8
面风速 (m/s)	0.4~0.6				
噪音 (dBA)	≤48	≤48	≤52	≤55	≤55
风量(m ³ /h)	240	240	480	720	960
功率 (W)	40	40	80	120	160
重量 (Kg)	180	210	270	340	400
材质	防腐PP材料				
电源电压	220V (50Hz)				
控制方式	触摸屏				
标配	温度监控, 过滤器饱和监控, 风机监控, VAV系统				
选配	UV灯, 水槽, 龙头 (特殊尺寸可定制)				

严格工序 客户见证



蝶莱通风柜以优良的品质与放心可靠的服务得到了用户一致的认可。
为用户带来更安全的工作环境是蝶莱不变的初心



武汉X益食品公司



江门XX医院



深圳XX大学




广州X木汽车配件厂



XX科技大学



广州X标检测有限公司

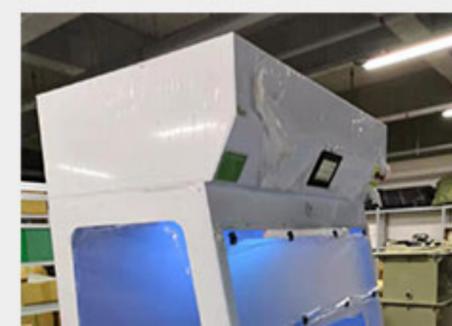



乐昌XX医院



组装



运输



板材加工



组装测试



整装代发

全国上门安装调试

熊经理18620021011 电话咨询享优惠

免费技术指导

公司简介

广东蝶莱环境技术有限公司，专业提供实验室室内污染防治解决方案及技术服务。公司拥有丰富的环保实验室规划经验，专注于为高等院校、科研机构、产品检测、化工行业、生物医药、食品饮料、疾控、畜牧、血站、公检法系统等领域的实验室提供废水处理、废气处理、消毒处理、通风处理的设备研发、系统方案设计及整体项目施工等全方位一站式专业服务。

针对实验室的环境设备发展需求，我司创新性打造出一整套可持续发展的绿色实验室环境整体解决方案。专业的设计团队，一对一的售前售后工程师，专注品质的研发团队和科学高效的施工队伍，为您建设更安全、更快捷、更舒适、更环保的实验室空间。



服务热线：400-996-2062 或 020-89854459
电子邮箱：dealye@126.com 官网：www.dealye.cn
地址：广州市高新技术产业开发区瑞泰路2号C栋四层自编C02号



扫描关注微信公众号